




DEFIGARD 4000

Le pouvoir de sauver des vies

Avec le DEFIGARD 4000, la défibrillation devient un jeu d'enfant.



MULTIPULSE
BIOWAVE

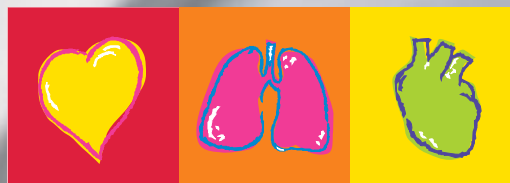

SCHILLER

The Art of Diagnostics

DEFIGARD 4000

Utilisation facile et intuitive avec un seul bouton pour accéder à toutes les fonctions principales :

- Sélection de l'énergie de défibrillation en mode manuel, choix du mode de stimulateur cardiaque, DSA.
- Le DEFIGARD 4000 est un défibrillateur biphasique à 200 joules doté de la technologie *MULTIPULSE BIOWAVE®*.
- Niveaux d'énergie disponibles : 2, 4, 8, 15, 30, 50, 70, 90, 120, 150 et 200 joules.
- L'écran de 5,9" clair et lumineux est visible dans n'importe quelles conditions et permet de visualiser les courbes ECG, la fréquence cardiaque, le pletysmogramme et la valeur de la SpO₂.

Tout ceci dans un appareil compact et léger.

Sa simplicité d'utilisation et son design combinés à un rapport prix / performance imbattable font du DEFIGARD 4000 l'appareil idéal pour toutes les situations d'urgence intra et extra hospitalières.



Adapté à une utilisation en ambulance et avion :

Un support, certifié 15 G, permet le maintien et l'utilisation de l'appareil en roulant ou en vol.

Le support combiné à une alimentation DC/DC permet d'alimenter l'appareil directement via le support.

L'appareil peut être décroché en un seul mouvement.



DEFIGARD 4000 avec électrodes de poing et sacoche



DEFIGARD 4000

DEFIGARD 4000, le défibrillateur idéal, et bien plus encore :

Disponible en version électrodes adhésives ou électrodes de poing

- **Défibrillation manuelle**
- **Défibrillation Semi Automatique (Option)**
Des messages vocaux et visuels guident l'utilisateur tout au long du processus de défibrillation. Reconnaissance des électrodes enfant et adaptation automatique de l'énergie.
- **Stimulateur cardiaque (Option)**
Mode de fonctionnement Fixe, Demande et Overdrive (fréquence x3).
- **Monitoring**
De 1 à 6 dérivations - affichage d'une courbe ECG + plethysmogramme OU deux courbes ECG dont une fixe.
- **SpO₂ Masimo (Option)**
Démarrage par détection du câble
- **Imprimante 3 pistes (Option)**
- **Mémoire**
Jusqu'à 13 heures d'ECG ou 500 événements ou 80 minutes d'ECG + environnement sonore et 500 événements si l'option DSA est active.
- **Interface USB** pour le téléchargement des données de la mémoire interne et pour la mise à jour logicielle.



Fixation murale





Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller Medical Equipment Co. Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86-010-52007020
diamond@schillermedical.com
www.schiller.cn



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 62 99 81-54
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Japan
SCHILLER Japan, Ltd.
Hiroshima 734-8551
Phone +81 82 250 2055
Fax +81 82 253 1713
koji.maekawa@schiller.jp
www.schiller.jp



Croatia
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerz.hr
www.schiller.ch



Latin America
SCHILLER Latin America, Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 954 673 0358
Fax +1 786 845 06 02
info@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com



USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com



SCHILLER

The Art of Diagnostics