



SODIMMED

La santé au-delà des horizons

*Société de Distribution de Matériel Médical et Orthopédique des Etablissements Dahmane
Agrément du Ministère de la Santé et de la population N° 108 du 14-01-2015*

Attelle d'urgence à depression EMSoft

Marque : **SPENCER**

Origine : **Italie**

Modèle : **EMSoft**



EMSoft

Les attelles EMSoft sont réalisées en vinyle assemblé et soudé par ultrasons. Elles se façonnent avec facilité et rapidité. Elles peuvent être utilisées pour immobiliser même en présence de fractures ouvertes. Sur la version de base les ceintures sont obtenues avec scratch. Les membres peuvent être soumis à un contrôle radiographique sans enlever le système d'immobilisation. La valve soudée au tissu en PVC garantit l'étanchéité et, grâce à un système unidirectionnel, évite le passage d'air après l'extraction de la pompe d'aspiration.

Caractéristiques :

Le jeu EMSoft est complet avec :

Attelle taille S (750 x 600 mm)

Attelle taille M (900 x 700 mm), solo nel kit con tre misure

Attelle taille L (1100 x 800 mm)

Pompe à vide

Sac en Ripstop

Dimensions EMSoft Kit deux tailles: 910 x 130 x h650mm

Dimensions EMSoft Kit trois tailles: 910 x 170 x h650mm

Poids EMSoft Kit deux tailles: 2,8 kg

Poids EMSoft Kit trois tailles: 3,6 kg

Température d'utilisation: de -5 à +40 °C

Température de stockage: de -10 à +50 °C







SODIMMED

La santé au-delà des horizons


*Société de Distribution de Matériel Médical et Orthopédique des Etablissements Dahmane
Agrément du Ministère de la Santé et de la population N° 108 du 14-01-2015*

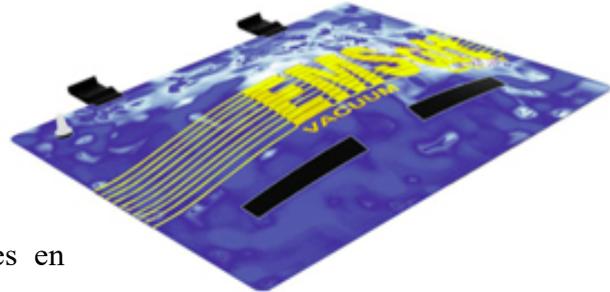

Le système de fixation est obtenu avec sangles en scratch transversales soudées à HFW sur le PVC.

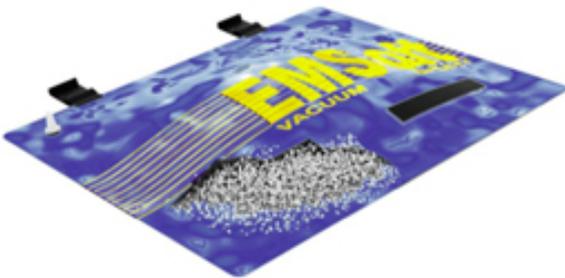

Les larges soudures à ultrasons et la réalisation d'une seule chambre permettent de distribuer les billes de polystyrène de façon plus sélective.

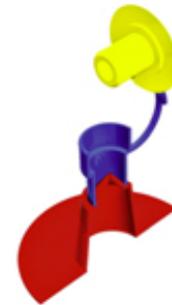

Valve unidirectionnelle, de simple utilisation, soudée à HFW.

