


ERG 911 L ERG 911 LS

Ergomètres médicaux de sécurité couché/semi couché de nouvelle génération

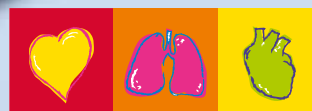

SCHILLER
The Art of Diagnostics

ERG 911 L

ERG 911 LS

Ergomètre médical en position allongée et ergomètre spécial pour l'échocardiographie à l'effort

Ergomètre de sécurité en position allongée/semi-allongée SCHILLER :

- ∴ Inclinaison et réglage électriques variables
- ∴ Châssis près du sol pour un accès facile
- ∴ Silencieux et confortable
- ∴ Configurable



ERG 911 L : ergomètre de sécurité en position allongée/semi-allongée, avec inclinaison variable de 0° à 45°

ERG 911 L : POSITION INCLINÉE POUR UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

Les ergomètres de sécurité en position allongée/semi-allongée ERG 911 L sont destinés à une utilisation en service de cardiologie. Certains aspects de sécurité nécessitent l'utilisation d'un ergomètre de sécurité en position allongée/semi-allongée, notamment pour les patients potentiellement affectés par des troubles du système cardiovasculaire, à l'effort à la suite d'un infarctus du myocarde, après une chirurgie de pontage ou dans des contextes exceptionnels tels que des tests de cathétérisme cardiaque. C'est précisément dans ce genre de situations que l'ergomètre de sécurité en position allongée/semi-allongée de SCHILLER prend tout son sens. L'utilisation d'un ergomètre de sécurité en position allongée/semi-allongée est également recommandée pour les examens pratiqués sur des personnes âgées ou en situation de handicap. Un positionnement optimal du patient sur la surface de

couchage permet d'obtenir des performances identiques à l'ergométrie de vélo.

ERG 911 LS : ERGOMÈTRE SPÉCIAL POUR L'ÉCHOCARDIOGRAPHIE

Le développement de l'ERG 911 LS s'appuie sur la technologie de l'ergomètre de sécurité en position allongée/semi-allongée ERG 911 L. Grâce à un axe de rotation supplémentaire du divan, le patient peut être positionné jusqu'à un angle de 30 degrés vers la gauche pendant l'effort, ce qui favorise l'acquisition d'images par ultrasons de haute qualité pendant l'échocardiographie d'effort. La stabilité du support d'épaule assure une position confortable et sécurisée pour le patient lorsque le divan est incliné vers la gauche pendant l'échocardiographie. Outre ces applications spéciales, l'ERG 911 LS peut bien entendu être utilisé comme un ergomètre de sécurité en position allongée/semi-allongée standard.

ERG 911 LS : INCLINAISON VARIABLE VERS LA GAUCHE (0° - 30°)

- 1 Ouverture dans la surface de couchage au niveau du cœur pour faciliter les examens par ultrasons
- 2 Guidon et support d'épaule stables pour un positionnement sécurisé du patient à l'inclinaison du divan
- 3 Support de hanche pour une sécurité accrue



Deux modes de fonctionnement :

- ❖ Mode à distance à l'aide d'un appareil maître (ECG, PC, etc.)
- ❖ Mode autonome à l'aide d'un protocole d'étapes défini par l'utilisateur ou d'un contrôle de charge manuel

Connexion Bluetooth et RS-232

Mesure de la SpO₂ (en option)

Guidon stable et réglable

Écran orientable à 180°

Boîtier élégant et facile à nettoyer

Haute précision de la charge

Très silencieux (même à grande vitesse)

Sans entretien grâce à un entraînement par courroie

Unité de mesure précise de la tension artérielle avec accoudoir (en option)

Appuie-tête et siège à réglage électrique

Ouverture au niveau du cœur pour l'échocardiographie d'effort


Inclinaison électrique variable vers la gauche (0° - 30°)

Structure stable en tubes d'acier pour les patients pesant jusqu'à 160 kg

Inclinaison électrique variable (0° - 45°)

Repose-pieds large et près du sol pour un accès facile

Structure ouverte permettant au cardiologue de réaliser des examens par ultrasons ergonomiques

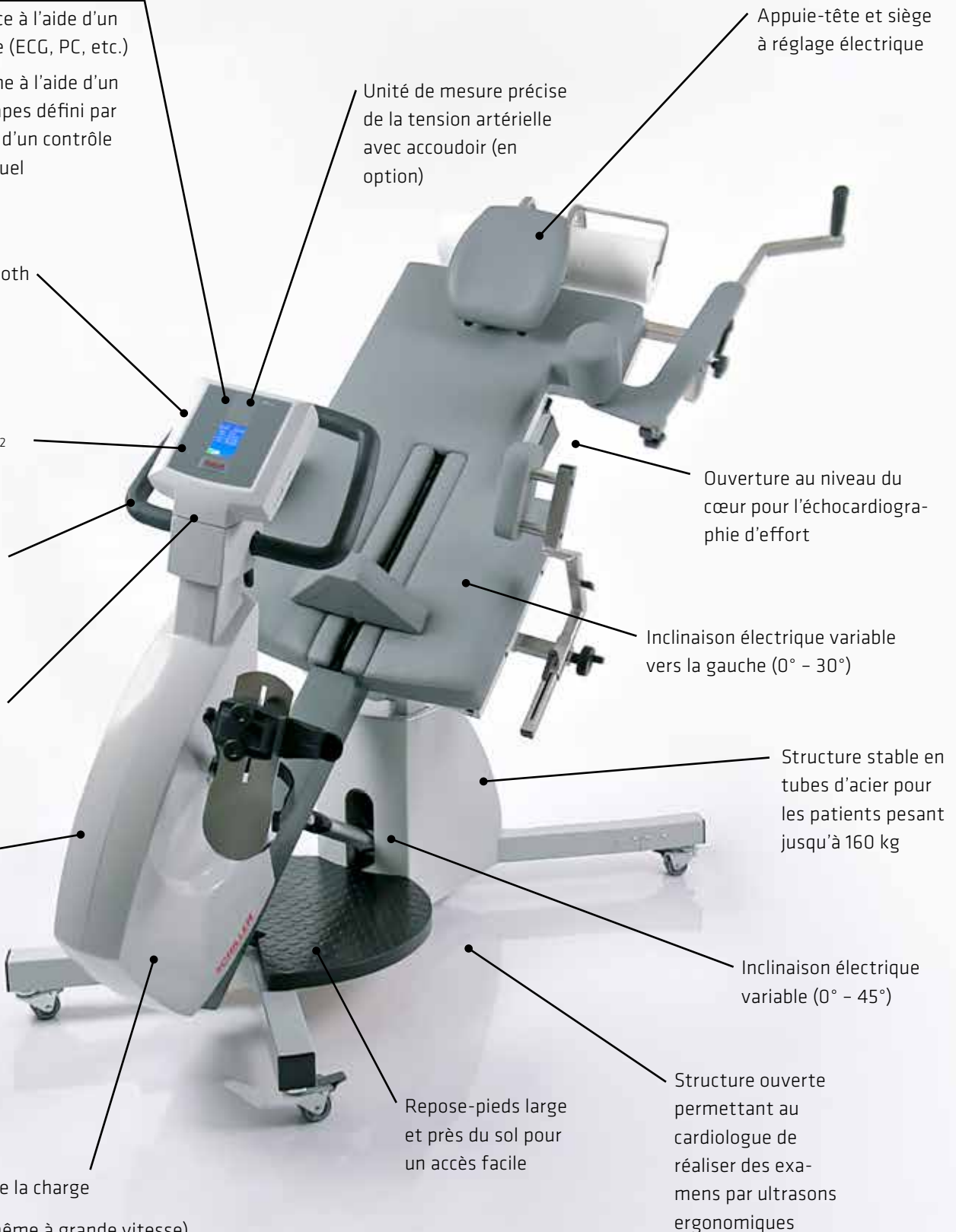



Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schilleramericas.com
 www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schilleramericas.com
 www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
 sales@schiller.com.my
 www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
 sales@schiller.at
 www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
 100102 Beijing, China
 Phone +86 10 84565453
 info@schillerchina.com
 www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
 info@schillerzg.hr
 www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
 info@schiller.fr
 www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
 contact@schillerfrance.fr
 www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
 info@schillermed.de
 www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
 sales@schillerindia.com
 www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 647 35 90
 schiller@schiller.pl
 www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
 mail@schiller.ru
 www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
 info@schiller.rs
 www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
 info@schiller.si
 www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
 schiller@schiller.es
 www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
 sales@schiller-reomed.ch
 www.schiller-reomed.ch



Türkiye
SCHILLER TÜRKİYE
 Okmeydanı-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
 info@schiller.com.tr
 www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Anstruther, Fife KY10 3H
 Phone +44 133 331 2150
 sales@schilleruk.com
 www.schilleruk.com

SCHILLER se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les caractéristiques présentées, ou d'interrompre le produit décrit à tout moment sans préavis ni obligation. Les images peuvent être représentatives. Certains produits peuvent ne pas être autorisés par voie réglementaire ou mis en vente sur tous les marchés. Contactez votre représentant SCHILLER pour les informations les plus récentes et la disponibilité.



SCHILLER
 The Art of Diagnostics