

DERMAT
MEDICAL SUPPLIES

016/ 40 05 45
info@dermat.be
www.dermat.be

ERGOLYS

FAUTEUIL AVEC LE CONFORT D'UN LIT DÉDIÉ
À LA DYALISE LOURDE



Fabrication Française

1860



HAcare
MEDICAL

1860

Le **groupe HACARE** totalise **200 ans d'expérience** dans le domaine de la **santé** à travers nos différentes marques selon les usages.


Nous mettons un point d'honneur à concevoir et fabriquer nos produits **en France**. Nous garantissons un **savoir-faire**, l'utilisation de **matière première** de qualité et un **assemblage méticuleux** des matériaux.

Tous nos produits répondent aux **normes** en vigueur et bien au-delà.

Avec **BMB Médical**, le groupe **HACARE** fabrique du mobilier médical spécialisé dans l'**accueil** et le **transfert** des patients pour les **hôpitaux publics et privés**.

Les fauteuils, brancards, fauteuils de soins ambulatoires **HACARE** sont une **solution** aux nécessités d'organisation des **flux patients** dans les **établissements**.



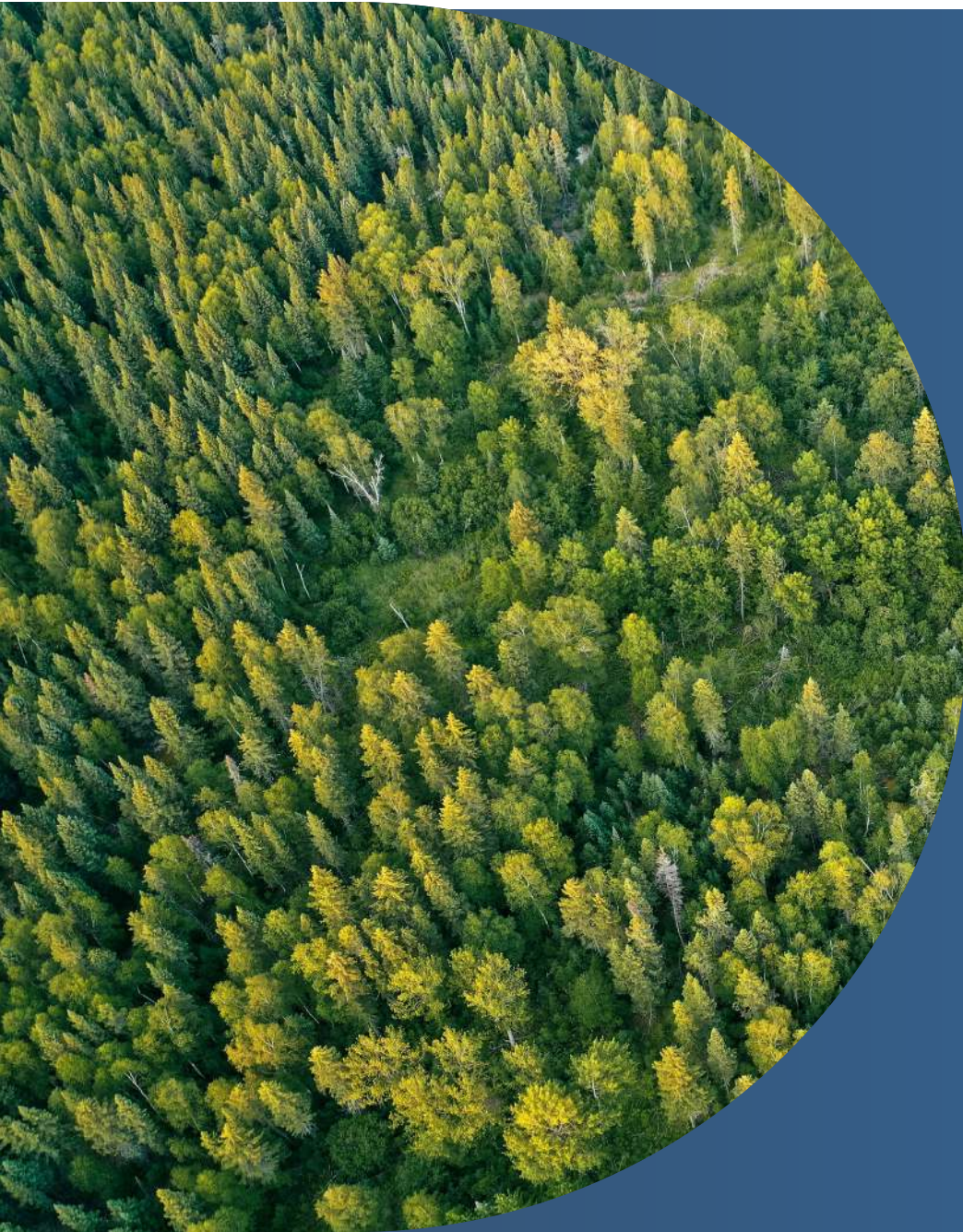

Le **groupe HACARE** s'engage pour une orientation industrielle éco-responsable.

Dans sa stratégie de développement durable, le **groupe HACARE** a défini une liste de 6 engagements qui guident ses actions et décisions depuis la création du groupe et pour les années à venir. Des indicateurs ont été mis en place pour chaque engagement.

LES 6 ENGAGEMENTS PORTENT SUR :

- Une production Made in France
- L'Intégration de l'économie circulaire dans tout nouveau développement produit
- L'Utilisation de ressources renouvelables
- Des Achats responsables (suivi qualité fournisseurs)
- La Mise en œuvre « d'actions au quotidien » pour le respect et la protection de l'environnement
- Faciliter le vivre ensemble et le soin à travers des produits qui luttent contre les TMS, et les nuisances sonores.



La **dialyse** est un **traitement** essentiel pour les personnes atteintes d'**insuffisance rénale** chronique.



Environ **60 000 patients** sont traités en dialyse en France



85% des patients sont traités par hémodialyse dans plus de **1 200 centres de dialyse** répartis sur tout le territoire.



Les patients en hémodialyse doivent se rendre au centre de dialyse **trois fois par semaine**, pour des séances de **3 à 4 heures**.






La dialyse nécessite de rester entre **4 et 5 heures** durant la journée, le plus souvent **trois fois par semaine**, dans un fauteuil qui devra, par conséquent, être d'un très grand confort.

Le fauteuil ERGOLYS **devient lit** et **s'adapte** à toutes les **morphologies** pour le plus **grand confort** du patient en dialyse.

Le fauteuil-lit ERGOLYS optimise **le soin, l'autonomie, le confort** et **la détente** du patient.

ERGOLYS peut également accueillir des **patients en chimiothérapie**.



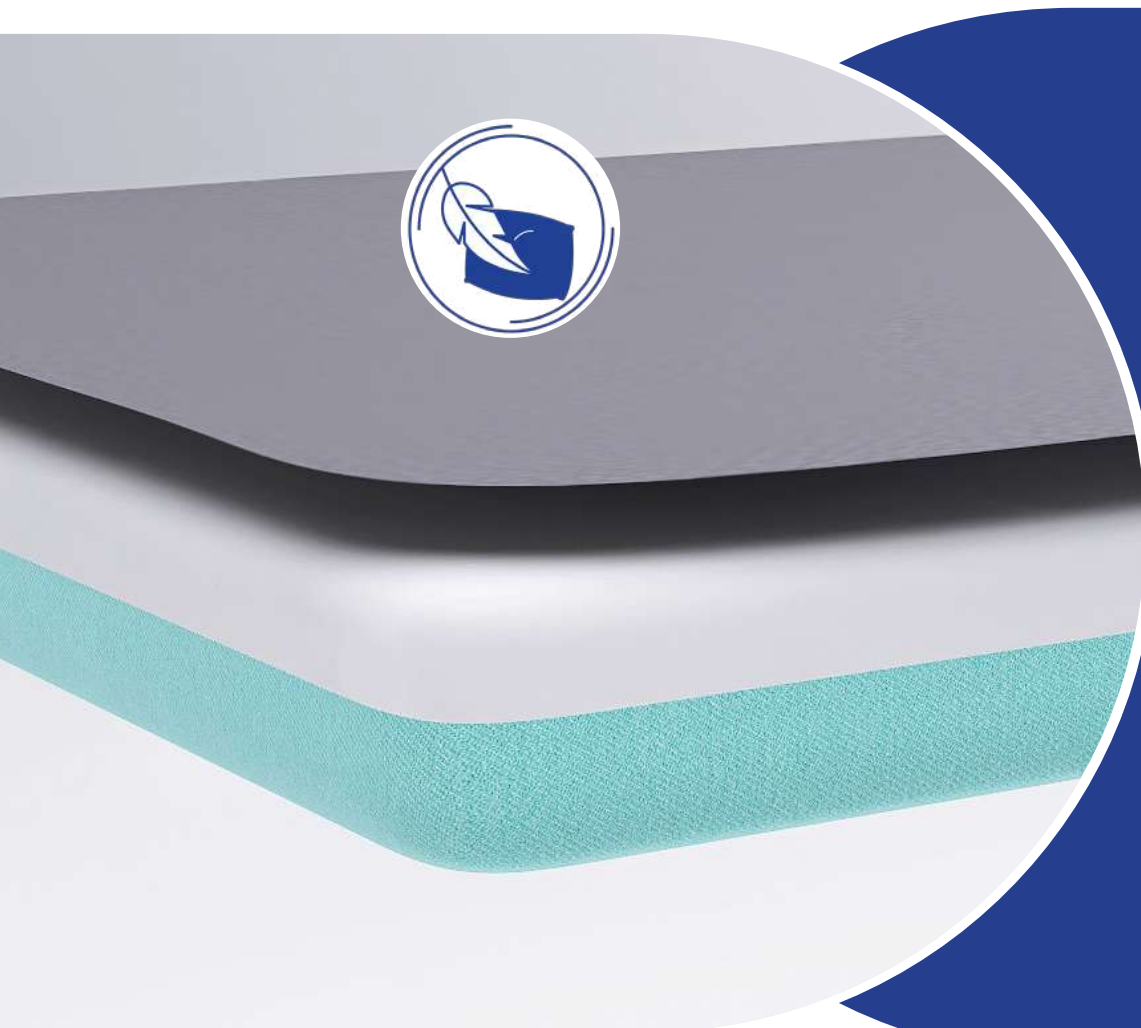

Des matériaux de sellerie **hautement résistants**, des **surfaces lisses** et une **décharge élevée** de la pression grâce à la **composition** du matelas contribuent au **confort du patient** en dialyse.



Positionnement agréable des patients quelque soit leur **morphologie** et leur classe de poids recommandé pour les **traitements de longue durée** comme la dialyse ou la chimiothérapie. Le **patient** est **détendu** pendant le traitement. La surface en **baquet** du matelas enveloppe et **sécurise** le patient.



Un **coussin réglable** vient compléter le matelas pour encore **plus de confort**



La **rotation** et l'**abaissement** de l'accoudoir permettent de **choisir une position** de traitement idéale et **intuitive**. Ces mouvements se font **sans aucun effort**, par simple actionnement du levier.



L'accoudoir peut être **ajusté** et même **tourné** afin de laisser le patient **s'installer confortablement** pour recevoir son traitement.



L'**ergonomie** de l'accoudoir contribue au **confort du patient**. Son **avant-bras** est **soutenu** sans pression grâce à la **forme étudiée** du manchon de l'accoudoir.





Le **repose-pieds** avec **recul automatique** lors de la remise en position fauteuil assure le **confort du patient** et **évite** toute **compression** au niveau de la **voûte plantaire**. Le repose-pieds permet une position assise particulièrement **détendue**. Un repose-pieds peut s'avérer **très utile** lors de la dialyse en permettant au patient de **pousser** contre ce support afin de **soulager** d'éventuelles crampes.



Le **pédalier** permet au patient de faire des **exercices** pendant la **durée de la dialyse** pour conserver son **autonomie** le plus longtemps possible



Le patient peut **facilement** activer la **veilleuse** sur le satellite afin de lire ou **se distraire** plus confortablement



Un **port usb, très accessible** sur le satellite, permet de **recharger téléphone** ou **tablette** et de poursuivre son activité sans craindre une panne d'énergie.



La **télécommande satellite** peut **changer de côté** en fonction du **bras monopolisé** par la dialyse.





La **déclive** d'urgence **aux pieds** libère les mains du soignant pour apporter le **maximum d'attention** au patient. La position décline peut être activée rapidement grâce à **la pédale** (rouge) bien visible, des **deux côtés** de l'ERGOLYS.

Le **freinage** est également accessible des **deux côtés** du fauteuil-lit et permet une position «**Arrêt**» très facile à mettre en oeuvre avant l'installation du patient pour le traitement.



La **télécommande filaire**, très accessible, permet au patient d'**ajuster** facilement la **position** de l'ERGOLYS et au soignant d'**intervenir** en cas de nécessité grâce aux fonctions et positions **pré-programmées**. L'utilisation des symboles facilite la compréhension des positions de l'ERGOLYS.

Le **travail** quotidien du soignant est **facilité**, et le **confort** du patient est optimisé.



La **télécommande satellite** est composée d'un **bras flexible** fixé sur le haut du relève-buste, et d'un **superviseur rotatif**.

Sa **fixation** à **droite** ou à **gauche** du relève-buste, permet de **libérer** l'accès au bras qui recevra la dialyse pour le **confort** du **patient**.

POSITION LIT



Les dialysés sont **fatigués** pendant la dialyse. Elle peut durer **4/5 heures**. La **position lit** de l'Ergolys permet aux dialysés de s'allonger pour une **sieste**.

POSITION RELAX



La **position relax** à la fois **ergonomique** et **reposante** permet une inclinaison à l'envie pour une position assise **confortable**

POSITION ULTRA CONFORT



La **position ultra confort** est **recommandée** par les médecins, ergothérapeutes et tous les spécialistes de santé. Cette posture «**zéro gravité**» est la position la plus **relaxante** qu'il soit.

POSITION DÉCLIVE



La **position déclive** permet une réinitialisation du plan de couchage pour une intervention **d'urgence**

ERGOLYS, UN PRODUIT ÉCO-RESPONSABLE, SANS COMPROMIS SUR SES PERFORMANCES.

Composante majeure de l'ERGOLYS, le **nouveau sommier** est en **fibre végétale** : **100% bois de réemploi**, ce matériau très **simple d'entretien** est **résistant aux chocs**, au **feu**, **hydrofuge**.

L'**indice végétal** de ERGOLYS atteint **26%**.



La **part de l'acier** dans la fabrication de l'ERGOLYS **diminue** au profit de **matériaux éco-responsables** et/ou **durables**. Les modes d'assemblage assurent un **niveau de réparabilité performant**.

ERGOLYS est conçu et **fabriqué en France**.



LES CARACTÉRISTIQUES



Retrouvez ici toutes les caractéristiques techniques



DIMENSIONS

Longueur (cm)	Position fauteuil 163 / position lit 235
Largeur (cm)	110
Longueur plan de couchage (cm)	215
Largeur plan de couchage (cm)	70
Hauteur variable mini (cm)	62
Hauteur variable maxi (cm)	102
Garde au sol	5cm
Dimensions relève-buste / relève-jambes (cm)	92x70 / 66x70
Épaisseur matelas (cm)	12

ACCOUDOIRS

Longueur (cm)	55
Largeur (cm)	17
Épaisseur (cm)	6
Hauteur par rapport à l'assise	25

SURFACE DE COUCHAGE

Matière plan de couchage	cartérisation du couchage
--------------------------	---------------------------

PIÈTEMENT

Type de piètement	roulette simple galet
Diamètre des roues (mm)	125

INCLINAISONS

Relève buste	0 à 75°
Relève jambes	0 à 25°
Déclive	20°

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient (kg)	200
CFS (kg)	250

TYPE

Type de hauteur variable	PI-type
Type de motorisation	électrique
Type de freinage	Freinage individuel


LES OPTIONS

ERORPE



REPOSE-PIEDS ÉLECTRIQUE 25 CM AVEC COUSSIN DE PIEDS ESCAMOTABLE

ACC3

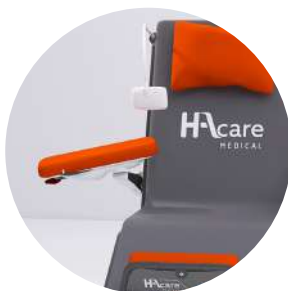

ACCOUDOIRS ESCAMOTABLES

ERODU



PÉDALE DE DÉCLIVE D'URGENCE AVEC DÉBRAYAGE D'URGENCE AUX PIEDS BILATÉRALE

ERORS1



ROUES 125MM À FREINAGE CENTRALISÉ BILATÉRAL DONT UNE DIRECTIONNELLE

CLORS2



ROUES 150 MM DOUBLE GALETS À COMMANDE CENTRALISÉE

EROSAT



TÉLÉCOMMANDE FLEX (SATELLITE)

EROBA



BATTERIE LI-ION

EROPED



PÉDALIER D'EXERCICE (ERORPE ET EROSAT OBLIGATOIRE)

LES ACCESSOIRES ET NUANCIER


ACCESSOIRES

EROCT




COUSSIN DE TÊTE RÉGLABLE
70X45CM

TSR2

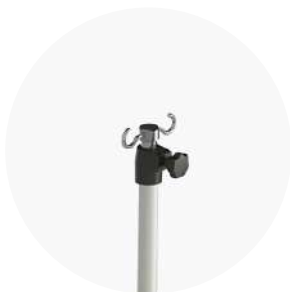

TIGE PORTE SÉRUM AMOVIBLE
EN 2 PARTIES, 2 CROCHETS

TSR4

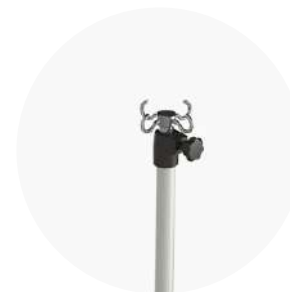

TIGE PORTE SÉRUM AMOVIBLE
4 CROCHETS, RÉGLAGE PAR
MOLETTE

NUANCIER (REPOSE-PIEDS, COUSSIN TÊTE, ACCOUDOIRS)

GRAPHITE



107-4003

TAUPE




107-0034

SISAL




107-1048

NIGHT

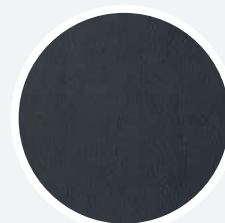


107-2108

ROSÉ

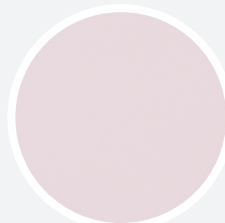


107-2114

TITAN

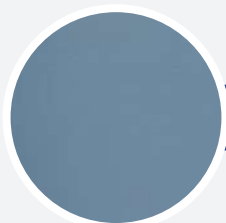


107-4042

NECTARINE

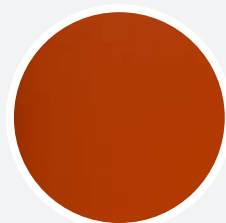

107-6003

SAFRAN

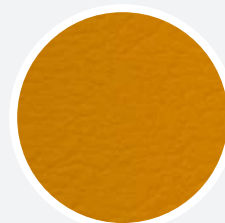

107-6012

TEAL



107-2119

OLIVE



107-5001